

# Oral-B

## iO™ SERIES 3<sub>N</sub>

SMART PRESSURE SENSOR  
INTELLIGENTE ANDRUCKKONTROLLE

### 3

SMART MODES  
SMART-MODI

iO ULTIMATE CLEAN  
iO ULTIMATIVE REINIGUNG



INSIDE  
INHALT

100%  
Cleaner  
teeth in  
1 week\*  
100%  
sauberere  
Zähne in  
1 Woche\*

\*vs. a regular  
manual toothbrush  
\*ggü. einer herkömmlichen  
Handzahnbürste

# Oral-B

## iO™




SERIES 3 | SERIES 4 | SERIES 5



⌚ 2 min



⌚ 2 min

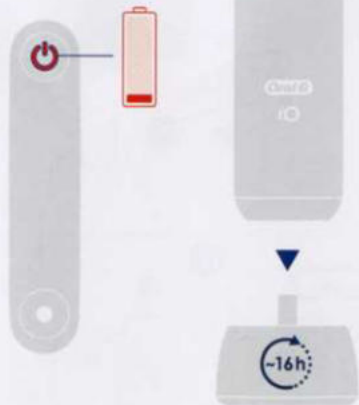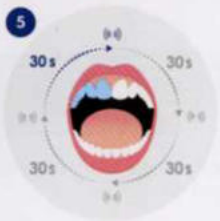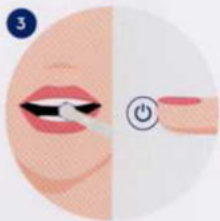

## iO™ SERIES 3 + SERIES 4

MODES



RESET  
2s

## iO™ SERIES 5

MODES





## Français

**A noter:** le contenu peut varier suivant le modèle acheté.

### Bienvenue chez Oral-B!

Avant d'utiliser cette brosse à dents, lire ces instructions et conserver ce manuel pour référence ultérieure.

## IMPORTANT

- Les brosses à dents peuvent être utilisées par des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si ils sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le produit/câble est endommagé, apportez-le à un centre de service Oral-B.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre appareil.

## AVERTISSEMENT

- Ne placez pas le chargeur, la prise intelligente ou l'étui de transport dans l'eau ou dans un liquide, et ne les rangez pas dans un endroit où ils pourraient tomber ou être tirés dans une baignoire ou un évier. Ne l'attrapez pas lorsqu'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.
- Cet appareil contient des piles non remplaçables. Ne pas ouvrir et démonter l'appareil. Pour le recyclage de la batterie, veuillez éliminer l'ensemble de l'appareil conformément aux réglementations environnementales locales. L'ouverture de la poignée détruira l'appareil et annulera la garantie.
- L'utilisation par des enfants de moins de 3 ans n'est pas recommandée.
- Ne pas mâcher ou mordre la brosse. Ne pas utiliser comme jouet ou sans la surveillance d'un adulte.
- Cette brosse à dents est un appareil de soins personnels et n'est pas destinée à être utilisée sur plusieurs patients dans un cabinet dentaire ou une institution.
- Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons l'utilisation de manches de brosse et de brossettes individuels pour chaque membre de la famille.
- De petites pièces peuvent se détacher, tenir hors de portée des enfants.
- Nettoyez correctement la brossette après chaque utilisation (voir paragraphe «Conseils de nettoyage»). Un nettoyage approprié garantit une utilisation sûre et une durée de vie fonctionnelle de la brosse à dents.

Pour éviter la casse de la brossette qui peut générer un risque d'étouffement de petites pièces ou endommager les dents :

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que la brossette est bien ajustée. Cessez d'utiliser la brosse à dents si la brossette ne s'ajuste plus correctement. Ne jamais utiliser sans brossette.
- Si le manche de la brosse à dents tombe, la brossette doit être remplacée avant la prochaine utilisation, même si aucun dommage n'est visible.
- Remplacez la brossette tous les 3 mois ou plus tôt si la brossette est usée.
- Lors du débranchement, tirez toujours sur la fiche d'alimentation au lieu du câble. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Uniquement pour le brossage des dents.
- Employer cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans cette notice. Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Vérifier régulièrement l'état général de l'appareil/du cordon d'alimentation/des accessoires. Si l'appareil est endommagé ou ne fonctionne plus, cesser toute utilisation.
- Ne pas tenter de modifier ou de réparer ce produit. Cela pourrait être cause d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.
- N'insérer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Le manche est étanche, protégé contre les accidents électriques et conçu pour être utilisé dans la salle de bains.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du capteur en pressant modérément sur la brossette pendant l'utilisation.

## Informations importantes

- Cette brosse à dents et pochette (accessoire) contiennent des aimants NdFeB et génèrent des champs magnétiques. Si vous utilisez un dispositif médical ou avez un dispositif médical implanté, consultez le fabricant du dispositif médical ou un médecin si vous avez des questions sur l'utilisation en toute sécurité de votre brosse à dents Oral-B iO.

### Uniquement pour iO Series 4 & iO Series 5 :

- Votre brosse à dents Oral-B peut être utilisée avec votre smartphone. Afin d'éviter des interférences électromagnétiques et/ou des incompatibilités, désactivez le Bluetooth sur le manche de la brosse à dents avant d'utiliser celle-ci dans des lieux réglementés, tels que les avion ou les zones de restrictions dans les hôpitaux.
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent toujours garder la brosse à dents à plus de 15 centimètres (six pouces) du stimulateur lorsqu'il est allumé. Chaque fois que vous soupçonnez une interférence, désactivez le Bluetooth sur la brosse à dents.
- Le Bluetooth est activé par défaut sur votre brosse à dents. Vous pouvez activer/désactiver le

Bluetooth à tout moment en appuyant sur le bouton on/off pendant 5 secondes. L'activation du Bluetooth est indiquée par l'allumage progressif de l'anneau lumineux bleu. La désactivation est indiquée par l'extinction progressive du témoin bleu.

Avertissement : Référez-vous au mode d'emploi de votre smartphone pour vous assurer que votre téléphone et votre chargeur sont adaptés à une utilisation dans une salle de bain.

## Brossettes

Oral-B vous propose une variété de brossettes Oral-B iO qui s'adaptent uniquement au manche de votre brosse à dents Oral-B iO. Ces brossettes uniques sont inspirées par les dentistes pour laisser votre bouche propre et fraîche.

## Conseils de nettoyage

Après chaque brossage, rincer la brossette sous l'eau claire en maintenant la brosse à dents allumée. Retirer la brossette et nettoyer le manche de la brosse à dents et la brossette séparément. S'assurer que l'eau s'écoule à l'intérieur de l'embout du manche alors qu'il est allumé, ainsi qu'à l'intérieur de la brossette. Essuyer tous les éléments de votre brosse et laisser sécher à l'air libre avant de réassembler votre brosse à dents iO. Débrancher le chargeur avant le nettoyage. Nettoyer régulièrement le chargeur avec un chiffon humide uniquement. Consulter les instructions de nettoyage de chaque accessoire dans son paragraphe de la section « Accessoires ».

Sujet à modifications sans préavis.

## Respect de l'environnement

Le produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne jetez pas dans les ordures ménagères, mais pour le recyclage, apportez-le aux points de collecte des déchets électriques dans votre pays.



Peut varier en fonction des produits

## Garantie

Nous proposons une garantie légale de conformité de 2 ans sur le produit, à compter de la date de l'achat. Pendant la période de la garantie, nous éliminerons, sans frais, tout défaut de l'appareil résultant d'une défaillance de matériaux ou de fabrication, soit en réparant soit en remplaçant l'appareil, à notre discrétion. Selon la disponibilité, le remplacement d'un appareil pourrait se faire avec un modèle de couleur différente ou un modèle équivalent. Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est fourni par Braun/Oral-B ou ses revendeurs agréés. Cette garantie ne couvre pas : les dommages dus à une mauvaise utilisation, l'usure normale, surtout en ce qui concerne les brossettes, ainsi que tout défaut ayant un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie est nulle si des personnes non autorisées effectuent des réparations et si des pièces Braun/Oral-B authentiques ne sont pas utilisées. Pour obtenir le service pendant la période de garantie, amenez ou envoyez l'appareil avec votre ticket de caisse à un centre de service client Oral-B Braun. Cette garantie n'affecte en rien vos droits prévus par la réglementation.

## Uniquement pour iO 4 Series et iO 5 Series :

Ces appareils sont équipés d'interfaces radio/Wi-Fi Bluetooth Smart approuvées. L'incapacité à établir une connexion Bluetooth Smart/Wi-Fi avec certains smartphones n'est pas couverte par la garantie de l'appareil, sauf si le dysfonctionnement du Bluetooth/Wi-Fi est imputable à Oral-B. Les appareils Bluetooth/Wi-Fi sont garantis par leurs propres fabricants et non par Oral-B. Oral-B n'influence ni ne fait aucune recommandation aux fabricants d'appareils, et Oral-B n'assume donc aucune responsabilité quant au nombre d'appareils compatibles avec notre interface Bluetooth/Wi-Fi.

Oral-B se réserve le droit, sans préavis, d'apporter des modifications techniques ou des modifications à la mise en œuvre du système des caractéristiques de l'appareil, de l'interface et de la structure du menu, qui sont jugés nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des systèmes Oral-B.

## Garantie – Exclusions et limitations

Cette garantie limitée s'applique uniquement aux nouveaux produits fabriqués par ou pour The Procter & Gamble Company, ses associés ou filiales (« P&G ») qui peuvent être identifiés par la marque de commerce Braun/Oral-B, le nom commercial ou le logo apposé sur leurs produits.

Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit n'appartenant pas à P&G, y compris le matériel et le logiciel. P&G n'est responsable d'aucun dommage ou perte de programmes, données ou autres informations stockées sur tout support contenu dans le produit, ou sur les produits ou pièces ne provenant pas de P&G et non couverts par cette garantie limitée. La récupération ou la réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux (i) dommages causés par accident, abus, utilisation abusive, négligence, usage impropre ou produit n'appartenant pas à P&G ; (ii) dommages causés par un service effectué par un tiers autre que Braun ou le site de service agréé de Braun ; (iii) produits ou pièces modifié(s) sans l'autorisation écrite de P&G.

## Informations

### Module radio Bluetooth®

Bien que toutes les fonctions indiquées sur l'appareil Bluetooth soient prises en charge, Oral-B ne garantit pas une fiabilité totale de la connexion ni la cohérence de fonctionnement.

La fiabilité des performances et de la connexion sont des conséquences directes de chaque périphérique Bluetooth, version logicielle, ainsi que du système d'exploitation de ces appareils Bluetooth et des réglementations de sécurité du fabricant mises en œuvre sur le dispositif.

Oral-B applique et met en œuvre strictement les normes de Bluetooth par lesquelles les appareils Bluetooth peuvent communiquer et fonctionner dans les brosses à dents iO Oral-B.

Cependant, si les fabricants de dispositifs ne mettent pas en œuvre ces normes, la compatibilité et les fonctionnalités Bluetooth seront compromises et l'utilisateur pourra rencontrer des problèmes fonctionnels et liés aux fonctionnalités. Notez que le logiciel installé sur l'appareil Bluetooth peut affecter de manière significative la compatibilité et le fonctionnement.

## Garantie des brossettes de rechange

La garantie Oral-B sera annulée si des dommages au manche de la brosse à dents électrique rechargeable sont attribués à l'utilisation de brossettes de rechange d'une autre marque qu'Oral-B. Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brossettes de rechange d'une autre marque qu'Oral-B.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brossettes de rechange d'autres marques qu'Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la performance de nettoyage des brossettes de rechange d'autres marques qu'Oral-B, comme indiqué avec le manche électrique rechargeable au moment de l'achat initial.
- Oral-B ne peut pas garantir un bon ajustement des brossettes de rechange d'autres marques qu'Oral-B.
- Oral-B ne peut pas prédire l'effet à long terme des brossettes de rechange d'autres marques qu'Oral-B sur l'usure du manche. Toutes les brossettes de rechange Oral-B portent le logo Oral-B et répondent aux normes de haute qualité Oral-B. Oral-B ne vend pas de brossettes de rechange ou de manches sous un autre nom de marque.

## 30 jours d'essai avec Oral-B

Satisfait ou remboursé!  
Détails sur [oralb.com](http://oralb.com) ou appelez le  
(FR) 0 800 944 803 (service et appel gratuit)  
(BE) 0800 14592  
(LU) 800 21172